




THUASNE

Ligaflex® Classic

fr	Attelle d'immobilisation du poignet.....	5
en	Wrist immobilisation splint.....	6
de	Handgelenkorthese zur Immobilisation.....	7
nl	Immobilisatiebrace voor de pols.....	9
it	Tutore di immobilizzazione per il polso.....	10
es	Férula de inmovilización de la muñeca.....	12
pt	Tala de imobilização do punho.....	13
da	Immobiliserende håndledsskinne.....	15
fi	Immobilisoiva rannetuki.....	16
sv	Immobiliseringsskena för handleden.....	17
el	Νάρθηκας ακινητοποίησης καρπού.....	18
cs	Zápěstní imobilizační ortéza.....	20
pl	Orteza do unieruchomienia nadgarstka.....	21
lv	Plaukstas locītavas imobilizācijas saite.....	23
lt	Riešo imobilizavimo įtvaras.....	24
et	Randme fikseerimise lahas.....	25
sl	Opornica za imobilizacijo zapestja.....	27
sk	Imobilizačná dlaha na zápästie.....	28
hu	Immobilizáló rögzítő csuklóhoz.....	29
bg	Шина за имобилизация на китка.....	31
ro	Atelă de imobilizare a încheieturii mâinii.....	32
ru	Шина для имобилизации запястья.....	33
hr	Udlaga za imobilizaciju ručnog zgloba.....	35
zh	腕部固定夹板.....	36
ar	جبيرة لتثبيت الرسغ.....	38

	0	10 - 13 cm
	1	13 - 15 cm
	2	15,5 - 17,5 cm
	3	18 - 20 cm
	4	20,5 - 23 cm




fr	Tour de poignet
en	Wrist circumference
de	Handgelenkumfang
nl	Polsomtrek
it	Circonferenza del polso
es	Contorno de la muñeca
pt	Perímetro do punho
da	Håndleddets omkreds
fi	Ranteen ympärysmitta
sv	Handledens omkrets
el	Περίμετρος καρπού
cs	Obvod zápěstí
pl	Obwód nadgarstka
lv	Plaukstas locītavas apkārtmērs
lt	Riešo apimtis
et	Randme ümbermõõt
sl	Obseg zapestja
sk	Obvod zápästia
hu	Csukló kerülete
bg	Обиколка на китката
ro	Circumferința încheieturii
ru	Обхват запястья
hr	Obujam ručnog zgloba
zh	腕围
ar	محيط الرسغ

fr	Immobilisation
en	Immobilisation
de	Ruhigstellung
nl	Immobilisatie
it	Immobilizzazione
es	Inmovilización
pt	Imobilização
da	Støtte
fi	Immobilisoi
sv	Immobilisering
el	Ακινητοποίηση
cs	Znehybnění
pl	Unieruchomienie
lv	Imobilizācija
lt	Imobilizavimas
et	Liikumatuks muutmine
sl	Imobilizacija
sk	Imobilizácia
hu	Rögzítés
bg	Обездвижване
ro	Imobilizare
ru	Иммобилизация
hr	Imobilizacija
zh	固定
ar	التثبيت



fr	Dispositif médical	Un seul patient - à usage multiple	Lire attentivement la notice
en	Medical Device	Single patient - multiple use	Read the instruction leaflet carefully
de	Medizinprodukt	Einzelner Patient - mehrfach anwendbar	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch
nl	Medisch hulpmiddel	Eén patiënt - meervoudig gebruik	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door
it	Dispositivo medico	Singolo paziente - uso multiplo	Leggere attentamente le istruzioni
es	Producto sanitario	Un solo paciente - uso múltiple	Leer atentamente las instrucciones
pt	Dispositivo médico	Paciente único - várias utilizações	Ler atentamente o folheto
da	Medicinsk udstyr	Enkelt patient - flergangsbrug	Læs brugsanvisningen omhyggeligt
fi	Lääkinnällinen laite	Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja	Lue käyttöohje huolellisesti
sv	Medicinteknisk produkt	En patient - flera användningar	Läs bipacksedeln noga före användning
el	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Πολλαπλή χρήση - σε έναν μόνο ασθενή	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
cs	Zdravotnický prostředek	Jeden pacient - vícenásobné použití	Pozorně si přečtete návod
pl	Wyrób medyczny	Wielokrotne użycie u jednego pacjenta	Należy dokładnie przeczytać instrukcję
lv	Medicīniska ierīce	Viens pacients - vairākkārtēja lietošana	Rūpīgi izlasiet norādījumus
lt	Medicinos priemonė	Vienas paciento - daugkartinis naudojimas	Atidžiai perskaitykite instrukciją
et	Meditsiiniseade	Ühel patsiendil korduvalt kasutatav	Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult
sl	Medicinski pripomoček	En bolnik - večkratna uporaba	Pozorno preberite navodila
sk	Zdravotnícka pomôcka	Jeden pacient - viacnásobné použitie	Tento návod si pozorne prečítajte
hu	Orvostechnikai eszköz	Egyetlen beteg esetében többször újrahasznáható	Figyelmesen olvassa el a betegájékoztatót
bg	Медицинско изделие	Един пациент - многократна употреба	Прочетете внимателно листовката
ro	Dispozitiv medical	Un singur pacient - utilizare multiplă	Citiți cu atenție prospectul
ru	Медицинское изделие	Многократное использование для одного пациента	Внимательно прочтите инструкцию
hr	Medicinski proizvod	Jedan pacijent - višestruka uporaba	Pažljivo pročitajte priručnik
zh	醫療器械	一位患者-多次使用	仔細閱讀說明書
ar	جهاز طبي	لمريض واحد - متكرر الاستعمال	اقرأ بعناية هذا الدليل

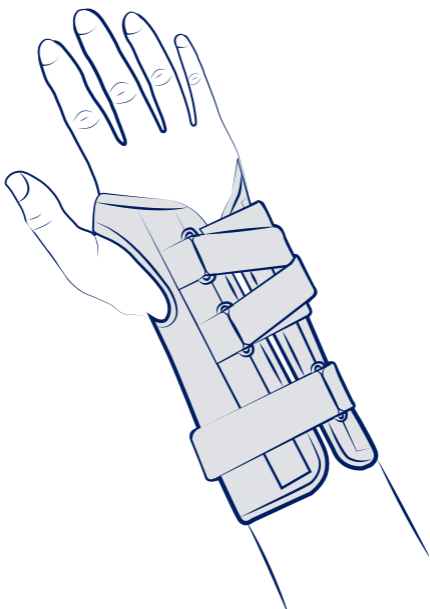

fr ATTELLE D'IMMOBILISATION DU POIGNET

Description/Destination

Ce dispositif est une attelle de poignet permettant l'immobilisation de l'articulation.

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition

Composants textiles : Polyamide - Polyester - Coton - Elasthane.

Composants rigides : Polyoxyméthylène - Aluminium.

Propriétés/Mode d'action

Immobilisation du poignet grâce à une baleine palmaire rigide, anatomique et confortable.

Tissu aéré, intérieur doublé de mousse.

Système de sangle double permettant d'assurer une contention homogène.

Indications

Entorse du poignet.

Fracture non chirurgicale du poignet.

Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet.

Tendinopathies du poignet.

Traitement conservateur du syndrome du canal carpien.

Epicondylite latérale.

Arthrite rhumatoïde.

Arthrose du poignet.

Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.

Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première application.

Il est recommandé qu'un adulte supervise l'application et l'utilisation du produit par un enfant.

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.

Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patches...).

Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place

Si nécessaire, conformer la baleine palmaire.

Ouvrir l'attelle et positionner le poignet à l'intérieur du produit.

Ajuster le système de serrage pour fermer l'attelle.

Entretien

Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Enlever la baleine avant lavage. A replacer à l'endroit initial avant la prochaine utilisation. Fermer les auto-agrippants avant lavage. Lavable en machine à 40°C (cycle délicat). Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Stockage

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2005

Conserver cette notice

en

WRIST IMMOBILISATION SPLINT

Description/Destination

This device is a wrist splint providing joint immobilisation.

The device is intended only for the treatment of the indications listed and for patients whose measurements correspond to the sizing table.

Composition

Textile components: Polyamide - Polyester - Cotton - Elastane.

Rigid components: Polyoxymethylene - Aluminium.

Properties/Mode of action

Immobilisation of the wrist via a rigid, malleable and anatomical palmar stay.
Aerated, foam lined fabric.

Dual strap system ensuring even compression.

Indications

Wrist sprain.

Non surgical wrist fracture.

Post-operative or post-traumatic wrist immobilisation.

Wrist tendinopathies.

Conservative treatment of carpal tunnel syndrome.

Lateral epicondylitis.

Rheumatoid arthritis.

Wrist osteoarthritis.

Contraindications

Do not use the product if the diagnosis has not been confirmed.

Do not apply the product in direct contact with broken skin.

Do not use in the event of known allergy to any of the components.

Precautions

Verify the product's integrity before every use.

Do not use the device if it is damaged.

Choose the appropriate size to fit the patient, referring to the size chart.

It is recommended that a health care professional supervises the first application.

It is recommended that an adult supervises the application and use of the product by a child.

Strictly comply with your healthcare professional's prescription and recommendations for use.

In the event of discomfort, significant hindrance, pain, variation in limb volume, abnormal sensations or change in colour of the extremities, remove the device and consult a health care professional.

For hygiene and performance reasons, do not re-use the product for another patient.

Do not use the device in case of application of certain products on the skin (creams, ointments, oils, gels, patches...).

It is recommended to adequately tighten the device to achieve support/immobilisation without restricting blood circulation.

Undesirable side-effect

This device can cause skin reactions (redness, itching, burns, blisters...) or wounds of various degrees of severity.

Any serious incidents occurring related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident.

Instructions for use/Application

If necessary, shape the palmar stay.

Open the splint et position the wrist inside the product.

Adjust the tightening system to close the splint.

Care/Maintenance

Product can be washed in accordance with the conditions shown on this instruction leaflet and on the label. Remove stay before washing. Replace in the original location before next use. Close the self-fastening tabs before washing. Machine washable at 40°C (delicate programme). Do not use detergents, fabric softeners or aggressive products (products containing chlorine). Do not dry clean. Do not tumble-dry. Do not iron. Squeeze out excess water. Dry flat. Dry away from any direct heat source (radiator, sun, etc.).

Storage

Store at room temperature, preferably in the original packaging.

Disposal

Dispose of in accordance with local regulations.

Keep this instruction leaflet

de HANDGELENKORTHESE ZUR IMMOBILISATION

Beschreibung/Zweckbestimmung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Handgelenkorthese zur Immobilisation des Gelenks.

Das Produkt ist ausschließlich für die Behandlung der aufgeführten Indikationen und für Patienten vorgesehen, deren Körpermaße der Größentabelle entsprechen.

Zusammensetzung

Textilkomponenten: Polyamid - Polyester - Baumwolle - Elasthan.

Feste Komponenten: Polyoxymethylen - Aluminium.

Eigenschaften/Wirkweise

Immobilisation des Handgelenks durch eine feste volare Schiene, die anatomisch geformt und anpassbar ist.

Atmungsaktives Gewebe, Innenseite mit Schaumstoff bezogen.

Doppelgurtsystem für gleichbleibende Ruhigstellung.

Indikationen

Distorsion des Handgelenks.

Nicht operativ zu versorgende Fraktur des Handgelenks.

Posttraumatische oder postoperative Immobilisation des Handgelenks.

Tendomyopathien des Handgelenks.

Konservative Behandlung des Karpaltunnelsyndroms.

Laterale Epicondylitis.

Rheumatoide Arthritis.

Arthrose des Handgelenks.

Gegenanzeigen

Verwenden Sie das Produkt nicht bei einer unsicheren Diagnose.

Das Produkt nicht direkt auf geschädigter Haut anwenden.

Das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

Vor jeder Verwendung die Unversehrtheit des Produkts überprüfen.

Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

Die für den Patienten geeignete Größe anhand der Größentabelle auswählen.

Es wird empfohlen, die erste Anwendung unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft durchzuführen.

Es wird empfohlen, Kinder bei der Anwendung und Verwendung des Produkts von einem Erwachsenen beaufsichtigen zu lassen.

Die von der medizinischen Fachkraft empfohlenen Verordnungen und Empfehlungen sind strikt einzuhalten.

Bei Unwohlsein, übermäßigem Beschwerden, Schmerzen, einer Änderung des Volumens der Gliedmaßen, ungewöhnlichen Empfindungen oder einer Verfärbung der Extremitäten das Produkt abnehmen und eine medizinische Fachkraft um Rat fragen.

Das Produkt darf aus hygienischen und leistungsbezogenen Gründen nicht für einen anderen Patienten wiederverwendet werden.

Das Produkt nach Anwendung bestimmter Produkte auf der Haut (Cremes, Salben, Öle, Gele, Pflaster ...) nicht anwenden.

Es wird empfohlen, das Produkt in angemessener Weise festzuziehen, um einen Halt/eine Immobilisation ohne Beeinträchtigung des Blutkreislaufes zu gewährleisten.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Dieses Produkt kann Hautreaktionen (Rötungen, Juckreiz, Verbrennungen, Blasen usw.) oder sogar Wunden mit unterschiedlichem Schweregrad verursachen.

Jegliche schweren Zwischenfälle in Verbindung mit diesem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, indem der Nutzer und/oder der Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

Gebrauchsanweisung/Anlegetechnik

Bei Bedarf die volare Schiene anpassen.

Die Orthese öffnen und Handgelenk in das Produkt legen.

Die Orthese mithilfe des Verschlusssystems schließen.

Pflege

Das Produkt entsprechend den Bedingungen in dieser Gebrauchsanweisung und der Etikettierung waschen. Vor dem Waschen die Schiene entfernen. Vor der nächsten Verwendung wieder korrekt anbringen.

Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen. Maschinenwaschbar bei 40°C (Schonwaschgang). Keine Reinigungsmittel, Weichspüler oder aggressive Produkte (chlorhaltige Produkte o. Ä.) verwenden. Keine Trockenreinigung. Nicht im Trockner drogen. Nicht bügeln. Wasser gut ausdrücken. Flach ausgebreitet drogen. Fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Sonne usw.) drogen lassen.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur und vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahren.

Entsorgung

Den örtlich geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen.

Diesen Beipackzettel aufbewahren

nl

IMMOBILISATIEBRACE VOOR DE POLS

Omschrijving/Gebruik

Deze polsbrace immobiliseert het gewricht.

Het hulpmiddel is alleen bedoeld voor de behandeling van de genoemde indicaties en voor patiënten van wie de maten overeenkomen met de maattabel.

Samenstelling

Textielcomponenten: Polyamide - Polyester - Katoen - Elastaan.

Rigide componenten: Polyoxymethyleen - Aluminium.

Eigenschappen/werkwijze

Immobilisatie van de pols dankzij een rigide, anatomische en comfortabele balein voor de handpalm.

Ademend materiaal, aan de binnenzijde voorzien van foam.

Dubbel bandensysteem zorgt ervoor dat de brace op zijn plaats wordt gehouden.

Indicaties

Verstuiking van de pols.

Niet-chirurgische polsfractuur.

Posttraumatische of postoperatieve immobilisatie van de pols.

Tendinopathie van de pols.

Conservatieve behandeling van het carpaal tunnelsyndroom.

Laterale epicondylitis.

Reumatoïde artritis.

Artrose van de pols.

Contra-indicaties

Gebruik het hulpmiddel niet indien de diagnose onduidelijk is.

Laat het hulpmiddel niet in direct contact komen met een beschadigde huid.

Gebruik het hulpmiddel niet in geval van bekende allergieën voor een van de componenten.

Voorzorgsmaatregelen

Controleer de betrouwbaarheid van het hulpmiddel vóór elk gebruik.

Gebruik het hulpmiddel niet als het beschadigd is.

Kies de juiste maat voor de patiënt aan de hand van de maattabel.

Het wordt aanbevolen dat een zorgprofessional meekijkt bij de eerste toepassing.

Het wordt aanbevolen dat een volwassene meekijkt indien een kind het hulpmiddel gebruikt en toepast.

Houd u strikt aan de voorschriften en de gebruiksinstructies van uw zorgprofessional.

In geval van ongemak, aanzienlijke hinder, pijn, verschil in omvang van de ledematen, een abnormaal gevoel of verandering in de kleur van de ledematen, verwijder het hulpmiddel en neem contact op met een zorgprofessional.

Om hygiënische redenen en omwille van de prestatiekwaliteit mag het hulpmiddel niet door andere patiënten worden gebruikt.

Gebruik de brace niet als bepaalde producten op de huid zijn aangebracht (crème, zalf, olie, gel, patches,...).

Het wordt aanbevolen om het hulpmiddel voldoende aan te spannen voor goede steun/immobilisatie zonder dat de bloedsomloop wordt beperkt.

Ongewenste bijwerkingen

Dit hulpmiddel kan huidreacties (roodheid, jeuk, branderigheid, blaren, enz.) of zelfs wonden in verschillende mate van ernst veroorzaken.

Elk ernstig voorval met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Gebruiksaanwijzing

Pas indien nodig de balein voor de handpalm aan.

Open de brace en leg de pols erin.

Pas het sluitsysteem aan om de brace te sluiten.

Verzorging

Het hulpmiddel kan worden gewassen volgens de voorschriften in deze bijsluiter en op het etiket. Verwijder de balein voor het wassen. Plaats ze na het wassen op dezelfde plek terug voor gebruik. Sluit de klittenbandsluitingen voor elke wasbeurt. Machinewasbaar op 40°C (fijne was). Gebruik geen reinigingsmiddelen, weekmakers of agressieve middelen (chloorproducten, enz.). Niet stomen. Niet in de wasdroger. Niet strijken. Overtollig water uitwringen. Liggend laten drogen. Uit de buurt van warmtebronnen laten drogen (radiator, zon, enz.).

Bewaaradvies

Bewaren op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele verpakking.

Verwijdering

Voer het hulpmiddel af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Deze handleiding bewaren

it

TUTORE DI IMMOBILIZZAZIONE PER IL POLSO

Descrizione/Destinazione d'uso

Questo dispositivo è un tutore per polso destinato all'immobilizzazione dell'articolazione.

Il dispositivo è destinato esclusivamente al trattamento delle patologie elencate e ai pazienti le cui misure corrispondono a quelle riportate nella relativa tabella.

Composizione

Componenti tessili: Poliammide - Poliesteri - Cotone - Elastane.

Componenti rigidi: Poliossimetilene - Alluminio.

Proprietà/Modalità di funzionamento

Immobilizzazione del polso grazie a una stecca palmare rigida, anatomica e modellabile.

Tessuto traspirante, interno rivestito in schiuma.
Sistema a doppia fascia per garantire un contenimento uniforme.

Indicazioni

Distorsione del polso.
Frattura non chirurgica del polso.
Immobilizzazione post-traumatica o post-operatoria del polso.
Tendinopatie del polso.
Trattamento conservativo della sindrome del tunnel carpale.
Epicondilite laterale.
Artrite reumatoide.
Artrosi del polso.

Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto in caso di incertezza della diagnosi.
Non mettere il prodotto a contatto diretto con la pelle lesa.
Non utilizzare in caso di allergia nota a uno dei componenti.

Precauzioni

Prima di ogni utilizzo, verificare l'integrità del dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo se danneggiato.
Scegliere la taglia adatta al paziente consultando la relativa tabella.
Si raccomanda la supervisione di un professionista sanitario in caso di prima applicazione.
Si raccomanda la supervisione di un adulto in caso di applicazione e utilizzo del prodotto da parte di un bambino.
Rispettare scrupolosamente le indicazioni e il protocollo di utilizzo indicato dal medico.
In caso di fastidio, disagio importante, dolore, variazione del volume dell'arto, sensazioni anomale o cambio di colore delle estremità, rimuovere il dispositivo e rivolgersi a un professionista sanitario.
Per ragioni di igiene ed efficacia del prodotto, non riutilizzare il dispositivo su un altro paziente.
Non utilizzare il dispositivo se sulla pelle vengono applicati determinati prodotti (creme, unguenti, oli, gel, patch, ecc.).
Si raccomanda di stringere il dispositivo in maniera tale da garantire una tenuta/immobilizzazione corretta senza compromettere la circolazione sanguigna.

Effetti indesiderati secondari

Questo dispositivo può provocare reazioni cutanee (rossori, prurito, bruciori, bolle, ecc.) o addirittura ferite di gravità variabile.
Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo dovrà essere notificato al fornitore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Istruzioni d'uso/Posizionamento

Se necessario, modellare la stecca palmare.
Aprire il tutore e posizionare il polso all'interno del prodotto.
Regolare il sistema di chiusura del tutore.

Manutenzione

Prodotto lavabile secondo le indicazioni riportate in queste istruzioni e nell'etichetta. Rimuovere la stecca prima del lavaggio. Ricollocare nella posizione originale prima del successivo utilizzo. Chiudere le strisce adesive prima del lavaggio. Lavabile in lavatrice a 40°C (ciclo delicato). Non utilizzare prodotti detergenti, ammorbidenti o aggressivi (prodotti clorati, ecc.). Non lavare a secco. Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Strizzare senza

torcere. Far asciugare in piano. Far asciugare lontano da fonti di calore dirette (calorifero, sole, ecc.).

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nella confezione originale.

Smaltimento

Smaltire conformemente alla regolamentazione locale in vigore.

Conservare queste istruzioni

es

FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN DE LA MUÑECA

Descripción/Uso

Este dispositivo es una férula de muñeca que permite la inmovilización de la articulación.

El dispositivo está destinado únicamente al tratamiento de las indicaciones listadas y a los pacientes cuyas medidas correspondan a la tabla de tallas.

Composición

Componentes textiles: Poliamida - Poliéster - Algodón - Elastano.

Componentes rígidos: Polioximetileno - Aluminio.

Propiedades/Modo de acción

Inmovilización de la muñeca gracias a una ballena palmar rígida, anatómica y adaptable.

Tejido ventilado, interior forrado de espuma.

Sistema de cinta doble que permite garantizar una contención homogénea.

Indicaciones

Esguince de muñeca.

Fractura no quirúrgica de la muñeca.

Inmovilización postraumática o postoperatoria de la muñeca.

Tendinopatías de la muñeca.

Tratamiento conservador del síndrome del canal carpiano.

Epicondilitis lateral (codo de tenista).

Artritis reumatoide.

Artrosis de la muñeca.

Contraindicaciones

No utilizar el producto en caso de diagnóstico incierto.

No colocar el producto directamente en contacto con la piel lesionada.

No utilizar en caso de alergia conocida a uno de los componentes.

Precauciones

Verificar la integridad del dispositivo antes de utilizarlo.

No utilizar el dispositivo si está dañado.

Elegir la talla adecuada para el paciente consultando la tabla de tallas.

Se recomienda que un profesional de la salud supervise la primera aplicación.

Se recomienda que un adulto supervise la aplicación y la utilización del producto por un niño.

Seguir estrictamente la prescripción y el protocolo de utilización recomendado por el profesional de la salud.

En caso de incomodidad, molestia importante, dolor, variación del volumen del miembro, sensaciones anormales o cambio de color de las extremidades, retirar el dispositivo y consultar a un profesional de la salud.

Por razones de higiene y de eficacia, no reutilizar el dispositivo para otro paciente.

No utilice el dispositivo en caso de aplicación de ciertos productos sobre la piel (cremas, pomadas, aceites, geles, parches...).

Se recomienda apretar de manera adecuada el dispositivo para asegurar una sujeción/inmovilización sin limitación de la circulación sanguínea.

Efectos secundarios indeseables

Este dispositivo puede producir reacciones cutáneas (rojeces, picor, quemazón, ampollas...) e incluso heridas de gravedad variable.

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debería ser objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o el paciente.

Modo de empleo/Colocación

Si fuera necesario, dé forma a la ballena palmar.

Abra la férula y posicione la muñeca en el interior del producto.

Ajuste el sistema de ajuste para cerrar la férula.

Mantenimiento

Producto lavable según las condiciones presentes en estas instrucciones y el etiquetado. Retire la ballena antes del lavado. Deberá colocarse en el lugar inicial antes del próximo uso. Cerrar las piezas autoadherentes antes del lavado. Lavable a máquina a 40°C (ciclo delicado). No utilizar detergentes, suavizantes o productos agresivos (productos clorados...). No lavar en seco. No secar en secadora. No planchar. Escurrir presionando. Secar en posición plana. Secar lejos de una fuente directa de calor (radiador, sol...).

Almacenamiento

Guardar a temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

Eliminación

Eliminar conforme a la reglamentación local vigente.

Conservar estas instrucciones

pt

TALA DE IMOBILIZAÇÃO DO PUNHO

Descrição/Destino

Este dispositivo é uma tala de punho que permite a imobilização da articulação.

Este dispositivo é destinado unicamente ao tratamento das indicações listadas e para pacientes cujas medidas correspondem à tabela de tamanhos.

Composição

Componentes têxteis: Poliamida - Poliéster - Algodão - Elastano.

Componentes rígidos: Polioximetileno - Alumínio.

Propriedades/Modo de ação

Imobilização do punho graças a uma vareta palmar rígida, anatómica e articulável.

Tecido arejado, interior dobrado de espuma.

Sistema de fita dupla que permite garantir uma contenção homogénea.

Indicações

Entorse do punho.

Fratura não cirúrgica do punho.

Imobilização pós-traumática ou pós-operatória do punho.

Tendinopatias do punho.

Tratamento conservador da síndrome do canal do carpo.

Epicondilite lateral.

Artrite reumatoide.

Artrose do punho.

Contraindicações

Não utilizar o produto no caso de diagnóstico indeterminado.

Não colocar o produto diretamente em contacto com uma pele lesionada.

Não utilizar em caso de alergia conhecida em relação a um de seus componentes.

Precauções

Verificar a integridade do dispositivo antes de cada utilização.

Não utilizar se o dispositivo estiver danificado.

Escolher o tamanho adequado ao paciente orientando-se pela tabela de tamanhos.

É recomendado que um profissional de saúde realize a supervisão da primeira aplicação.

É recomendado que um adulto realize a supervisão da aplicação e da utilização do produto por uma criança.

Manter-se em estrita conformidade com a prescrição e o protocolo de utilização recomendado pelo seu profissional de saúde.

Em caso de desconforto, de grande incómodo, de dor, de variação de volume do membro, de sensações anormais ou de alteração da cor das extremidades, retirar o dispositivo e consultar um profissional de saúde.

Por motivos de higiene e de desempenho, não reutilizar o dispositivo para um outro paciente.

Não utilize o dispositivo ao aplicar certos produtos na pele (cremes, pomadas, óleos, géis, adesivos...).

É recomendado o aperto do dispositivo de forma adequada para garantir uma manutenção/imobilização sem a limitação da circulação sanguínea.

Efeitos secundários indesejáveis

Este dispositivo pode provocar reações cutâneas (vermelhidão, comichão, queimaduras, bolhas...) ou mesmo feridas de gravidade variável.

Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo deverá ser objeto de notificação junto do fabricante e junto da autoridade competente do Estado Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

Aplicação/Colocação

Se necessário, ajuste a vareta palmar.

Abra a tala e posicione o punho no seu interior.

Ajuste o sistema de aperto para fechar a tala.

Cuidados

Produto lavável segundo as condições indicadas neste folheto e na rotulagem.

Retire a vareta antes da lavagem. Voltar a colocar no local inicial antes da utilização seguinte. Fechar os velcros antes da lavagem. Lavável na máquina a 40°C (ciclo delicado). Não utilizar detergentes, amaciadores ou produtos agressivos (produtos com cloro...). Não limpar a seco. Não utilizar máquina de secar roupa. Não passar a ferro. Escorrer através de pressão. Secar em posição plana. Secar longe de fontes diretas de calor (radiador, sol...).

Armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente, de preferência na embalagem de origem.

Eliminação

Eliminar em conformidade com a regulamentação local em vigor.

Conservar estas instruções

da IMMOBILISERENDE HÅNDELEDSSKINNE

Beskrivelse/Tiltænkt anvendelse

Dette udstyr er en håndledsskinne, der tillader at immobilisere leddet. Udstyret er udelukkende beregnet til behandling af de anførte indikationer og til patienter med mål, som svarer til størrelsesskemaet.

Sammensætning

Dele i tekstil: Polyamid - Polyester - Bomuld - Elastan.

Stive dele: Polyoxymethylen - Aluminium.

Egenskaber/Handlingsmekanisme

Immobilisering af håndleddet takket være en stiv, anatomisk og tilpasselig palmar stiver.

Luftigt stof, inderside foret med skum.

System med dobbelt strop, som sikrer en ensartet fastholdelse.

Indikationer

Forstuvning af håndled.

Ikke kirurgisk fraktur af håndled.

Posttraumatisk eller postoperatorisk immobilisering af håndleddet.

Håndledstendinopatii.

Bevarende behandling af karpaltunnelsyndrom.

Lateral epikondylit.

Reumatoid arthritis.

Håndledsartrose.

Kontraindikationer

Brug ikke produktet i tilfælde af en usikker diagnose.

Produktet må ikke placeres i direkte kontakt med en læderet hud.

Må ikke bruges i tilfælde af kendt allergi over for et af komponenterne.

Forholdsregler

Kontroller, at produktet er intakt før hver brug.

Udstyret må ikke bruges, hvis det er beskadiget.

Vælg en størrelse, der er egnet til patienten ved hjælp af størrelsesskemaet. Det anbefales, at en sundhedsfaglig person kontrollerer den første påsætning.

Det anbefales, at en voksen kontrollerer et barns påsætning og anvendelse af produktet.

Den sundhedsfaglige persons ordinerings og protokol vedrørende anvendelse skal følges meget nøje.

I tilfælde af ubehag, vigtig gene, smerter, ændring af lemmets volumen, unormale fornemmelser eller ændring af ekstremitetens farve, tag produktet af og rådspørg en sundhedsfaglig person.

Udstyret må ikke bruges til en anden patient af hygiejniske årsager og for at bevare udstyrets ydeevne.

Udstyret må ikke bruges i tilfælde af påføring af visse produkter på huden (creme, pomade, olie, gel, patch...).

Det anbefales at stramme udstyret på en passende måde for at sikre en fastholdelse/immobilisering uden begrænsning af blodcirkulation.

Bivirkninger

Dette udstyr kan medføre hudreaktioner (rødmen, kløe, forbrændinger, vabler m.m.) og endda sår af forskellige sværhedsgrader.

Enhver alvorlig hændelse, som er opstået i forbindelse med udstyret, skal meddeles til producenten og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

Brugsanvisning/Påsætning

Tilpas den palmare stiver, hvis det er nødvendigt.
Åbn skinnen og placer håndleddet inde i produktet.
Juster strammesystemet for at lukke skinnen.

Pleje

Vaskbart produkt under de anførte betingelser i denne vejledning og på etiketten. Tag stiveren af før vask. Skal sættes i igen det oprindelige sted før næste anvendelse. Luk burrebåndene før vask. Kan vaskes i maskine ved 40°C (skåneprogram). Brug ikke rensmidler, blødgøringsmidler eller aggressive produkter (klorholdige produkter m.m.) Må ikke kemisk renses. Må ikke tørretumbles. Må ikke stryges. Pres vandet ud. Lad tørre fladt. Lad tørre på afstand af en direkte varmekilde (radiator, sol m.m.).

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur og helst i den originale emballage.

Bortskaffelse

Skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
Opbevar denne brugsanvisning

fi

IMMOBILISOIVA RANNETUKI

Kuvaus/Käyttötarkoitus

Tämä laite on rannetuki, joka mahdollistaa nivelten immobilisoinnin. Tämä väline on tarkoitettu vain lueteltujen käyttöaiheiden hoitoon ja valitsemalla potilaalle oikea koko oheisesta kokotaulukosta.

Rakenne

Tekstiilikomponentit: Polyamidi - Polyesteri - Puuvilla - Elastaani.
Jäykät komponentit: Polyoksimeteeni - Alumiini.

Ominaisuudet/Toimintatapa

Ranteen immobilisointi jäykän, anatomisen ja mukautuvan kämmenpuolen lastan ansiosta.

Ilmava kangas, sisäosa vuorattu vaahtomuovilla.

Kaksoishihnajärjestelmä varmistaa tasaisen tuennan.

Käyttöaiheet

Ranteen venähdys

Ei-kirurginen ranteen murtuma.

Ranteen immobilisointi trauman tai leikkauksen jälkeen.

Ranteen tendinopatiat.

Rannekanavaoireyhtymän konservatiivinen hoito.

Tenniskyynärpää.

Nivelreuma.

Ranteen nivelrikko.

Vasta-aiheet

Älä käytä tuotetta, jos diagnoosi on epävarma.

Älä aseta tuotetta suoraan kosketuksiin vaurioituneen ihon kanssa.

Älä käytä, jos tiedossa on allergia jollekin rakenneosista.

Varotoimet

Tarkista laitteen eheys ennen jokaista käyttöä.

Älä käytä välinettä, jos se on vaurioitunut.

Valitse oikea koko potilaalle kokotaulukosta.

On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilainen valvoo tuotteen ensimmäistä asetusta.

On suositeltavaa, että aikuinen valvoo tuotteen asettamista ja käyttöä lapsella.

Noudata ehdottomasti lääkärin antamia ohjeita ja käyttösuosituksia. Jos ilmenee epämukavuutta, merkittävää haittaa, kipua, raajan tilavuuden muutoksia, epätavanomaisia tuntemuksia tai värimuutoksia, poista väline ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Hygienian ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi älä käytä välinettä uudelleen toisella potilaalla.

Älä käytä laitetta, jos iholle on levitetty tiettyjä tuotteita (voiteet, rasvat, öljyt, geelit, laastarit jne.).

Kiristä väline sopivasti niin, että se immobilisoi raajan ja pitää sitä paikallaan häiritsemättä verenkiertoa.

Ei-toivotut sivuvaikutukset

Väline voi aiheuttaa ihoreaktioita (punoitusta, kutinaa, palovammoja, rakkuloita jne.) tai jopa vaihtelevan vaikeusasteen haavoja.

Kaikista välineen yhteydessä tapahtuvista vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

Käyttöohje/Asettaminen

Tarvittaessa mukauta kämmenlastaa.

Avaa tuki ja aseta ranne tuen sisään.

Sulje tuki kiristysjärjestelmän avulla.

Hoito

Tuote voidaan pestä tämän pakkausselosteen ja etikettien ohjeiden mukaisesti. Poista lasta ennen pesua. Aseta alkuperäiseen paikkaan ennen seuraavaa käyttöä. Sulje tarrakiinnikkeet ennen pesua. Konepestävä 40 °C:ssa (hienopesu). Älä käytä pesuaineita, huuhteluaineita tai voimakkaita tuotteita (klooria sisältävät tuotteet). Ei saa kuivapestä. Ei saa kuivata kuivausrummussa. Ei saa silittää. Puristele liika vesi pois. Kuivata tasossa. Anna kuivua etäällä suorasta lämmönlähteestä (lämpöpatteri, auringonvalo jne.).

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa.

Hävittäminen

Hävitä voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Säilytä tämä käyttöohje

sv

IMMOBILISERINGSSKENA FÖR HANDELEN

Beskrivning/Avsedd användning

Denna enhet är en handledsskena som möjliggör immobilisering av leden. Enheten är endast avsedd för behandling av de angivna indikationerna och för patienter vars mått motsvarar storlekstabellen.

Sammansättning

Material textilier: Polyamid - Polyester - Bomull - Elastan.

Styva komponenter: Polyoximetylen - Aluminium.

Egenskaper/Verkningsätt

Immobilisering av handleden tack vare en styv, anatomisk och anpassningsbar skena för handflatan.

Luftigt tyg, skumgummifodrad insida.

System med dubbla remmar för att säkerställa homogent stöd.

Indikationer

Vrickning av handleden.

Icke-kirurgisk handledsfraktur.

Posttraumatisk eller postoperativ immobilisering av handleden.

Tendinopatier i handleden.

Konservativ behandling av karpaltunnelsyndrom.
Lateral epikondylit.
Reumatoid artrit.
Handled sartros.

Kontraindikationer

Får ej användas vid osäker diagnos.
Applicera inte produkten direkt på skadad hud.
Får ej användas vid känd allergi mot något av innehållsämnen.

Försiktighetsåtgärder

Kontrollera att produkten är hel före varje användning.
Får ej användas om produkten är skadad.
Välj en storlek som är lämplig för patienten med hjälp av storlekstabellen.
Sjukvårdspersonal bör övervaka den första appliceringen.
En vuxen bör övervaka appliceringen och användningen av produkten hos barn.
Följ noga rekommendationer och bruksanvisningar från sjukvårdspersonalen.
Ta av produkten och rådgör med sjukvårdspersonalen vid obehag, besvär eller smärta eller om armen eller benet ändrar storlek eller färg eller känns annorlunda.
Av hygien- och prestandaskäl ska produkten inte återanvändas av en annan patient.
Använd inte enheten om vissa produkter appliceras på huden (krämer, salvor, oljor, geler, patch etc.).
Dra åt produkten lagom mycket för att uppnå stöd/immobilisering utan att förhindra blodcirkulationen.

Biverkningar

Denna produkt kan orsaka hudreaktioner (rodnad, klåda, brännskador, blåsor osv.) eller sår med olika grad av allvarlighet.
Alla allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Bruksanvisning/användning

Vid behov, anpassa skenan för handflatan.
Öppna stödet och placera handleden inuti produkten.
Justera åtdragningssystemet för att stänga skenan.

Skötsel

Produkten kan tvättas enligt tvättanvisningarna i denna bipacksedel och på etiketten. Ta ur skenan före tvätt. Placera på ursprunglig plats innan nästa användning. Förslut kardborrebanden före tvätt. Kan tvättas i maskin i högst 40°C (skontvätt). Använd inte rengöringsmedel, sköljmedel eller alltför starka produkter (med klor). Får ej kemtvättas. Får ej torktumlas. Får ej strykas. Pressa ur vattnet. Torkas plant. Låt lufttorka långt ifrån direkta värmekällor (värmeelement, sol osv.).

Förvaring

Förvaras vid rumstemperatur, helst i ursprungsförpackningen.

Kassering

Kassera i enlighet med gällande lokala föreskrifter.
Spara denna bipacksedel

el

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥ

Περιγραφή/Σημείο εφαρμογής

Αυτό το προϊόν είναι ένας νάρθηκας καρπού που επιτρέπει την ακινητοποίηση της άρθρωσης.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη θεραπεία των αναφερόμενων ενδείξεων και για ασθενείς των οποίων οι διαστάσεις αντιστοιχούν στον πίνακα μεγεθών.

Σύνθεση

Σύνθεση υφασμάτων μερών: Πολυαμίδη - Πολυεστέρας - Βαμβάκι - Ελαστάνη.

Σύνθεση άκαμπτων μερών: Πολυοξυμεθυλένιο - Αλουμίνιο.

Ιδιότητες/Μηχανισμός δράσης

Ακίνητοποίηση του καρπού χάρη σε ένα άκαμπτο, ανατομικό και ρυθμιζόμενο παλαμιαίο έλασμα.

Αεριζόμενο, αφρώδες ύφασμα.

Σύστημα διπλού μάντα για διασφάλιση ομοιογενούς συγκράτησης.

Ενδείξεις

Διάστρεμμα καρπού.

Κάταγμα του καρπού χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση.

Μετατραυματική ή μετεγχειρητική ακίνητοποίηση του καρπού.

Τενοντίτιδα καρπού.

Συντηρητική θεραπεία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα.

Πλευρική επικονδυλίτιδα.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Άρθρωση του καρπού.

Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που η διάγνωση είναι αβέβαιη.

Μη τοποθετείτε το προϊόν απευθείας σε επαφή με τραυματισμένο δέρμα.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Προφυλάξεις

Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για τον ασθενή ανατρέχοντας στον πίνακα μεγεθών.

Συνιστάται η πρώτη εφαρμογή να επιβλέπεται από έναν επαγγελματία υγείας.

Συνιστάται η εφαρμογή και η χρήση του προϊόντος από ένα παιδί να επιβλέπεται από έναν ενήλικα.

Τηρείτε αυστηρά τη συνταγή και το πρωτόκολλο χρήσης που συνιστά ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί.

Σε περίπτωση δυσφορίας, σημαντικής ενόχλησης, πόνου, μεταβολής του όγκου του άκρου, ασυνήθιστων αισθήσεων ή αλλαγής του χρώματος των άκρων, αφαιρέστε τη συσκευή και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Για λόγους υγιεινής και απόδοσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άλλον ασθενή.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχετε εφαρμόσει συγκεκριμένα προϊόντα στο δέρμα (κρέμες, αλοιφές, έλαια, γέλη, επιθέματα, κ.λπ.).

Συνιστάται να σφίξετε επαρκώς τη συσκευή προκειμένου να διασφαλίσετε τη διατήρηση/αδρανοποίηση χωρίς περιορισμό της ροής του αίματος.

Δευτερεύουσες ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτή η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις (ερυθρότητα, κνησμό, εγκαύματα, φουσκάλες...) ή ακόμη και πληγές διαφορετικής εντάσεως.

Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει και σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Οδηγίες χρήσης/Τοποθέτηση

Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το παλαμιαίο έλασμα. Ανοίξτε τον νάρθηκα και τοποθετήστε τον καρπό μέσα στο προϊόν. Ρυθμίστε το σύστημα πρόσδεσης για να κλείσετε τον νάρθηκα.

Συντήρηση

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών και στην ετικέτα. Αφαιρέστε το στέλεχος πριν από την πλύση. Τοποθετήστε και πάλι στην αρχική θέση πριν από την επόμενη χρήση. Κλείστε τα αυτόματα άγκιστρα και τους βρόχους πριν από το πλύσιμο. Πλένεται στο πλυντήριο, στους 40°C (στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα). Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή πολύ ισχυρά προϊόντα (προϊόντα με βάση την χλωρίνη...). Μην υποβάλετε σε στεγνό καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μην σιδερώνετε. Στραγγίστε πιέζοντας. Αφήστε να στεγνώσει σε επίπεδη επιφάνεια. Στεγνώνετε μακριά από άμεση πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, ήλιος...).

Αποθήκευση

Φυλάξτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά προτίμηση στο αρχικό κουτί.

Απόρριψη

Απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης

cs ZÁPĚSTNÍ IMOBILIZAČNÍ ORTÉZA

Popis/Použití

Tato pomůcka je zápěstní ortéza zabezpečující imobilizaci kloubu. Pomůcka je určena pouze k léčbě uvedených indikací a pro pacienty, kteří mají příslušnou velikost dle tabulky velikostí.

Složení

Textilní částí: Polyamid - Polyester - Bavlna - Elastan.

Tuhé částí: Polyoxymethylenu - Hliník.

Vlastnosti/Mechanismus účinku

Imobilizace zápěstí pomocí tuhé, anatomické a tvarované dlaňové výztuže.

Vzdušná látka s vnitřní pěnovou podšívkou.

Systém dvojitých popruhů zajišťuje rovnoměrné zpevnění.

Indikace

Vymknuté zápěstí.

Zlomenina zápěstí řešená konzervativně.

Posttraumatická nebo pooperační imobilizace zápěstí.

Tendinopatie zápěstí.

Konzervativní léčba syndromu karpálního tunelu.

Laterální epikondylitida.

Revmatoidní artritida.

Osteoartróza zápěstí.

Kontraindikace

Výrobek nepoužívejte, pokud nemáte potvrzenou diagnózu.

Nepřikládejte přímo na poraněnou kůži.

Výrobek nepoužívejte, pokud máte prokázanou alergii na některou složku výrobku.

Upozornění

Před každým použitím zkontrolujte, že je pomůcka neporušená.

Poškozenou pomůcku nepoužívejte.

Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí.

První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti lékaře.

Pokud výrobek nosí a používá dítě, mělo by být pod dohledem rodiče.

Je nutné se přesně řídit předpisem a pokyny k použití, které vám dal lékař.

Pokud pocítíte nepohodlí, výrazné obtíže, bolest, změnu objemu končetiny, nezvyklou změnu citlivosti nebo změnu barvy končetin, pomůcku sundejte a vyhledejte lékaře.

Z hygienických důvodů a z důvodu správného fungování je pomůcka určena jednomu pacientovi.

Pomůcku nepoužívejte, pokud jsou na pokožku nanесeny určité přípravky (krémy, masti, oleje, gely, náplasti atd.).

Pomůcku doporučujeme utáhnout tak, že končetinu drží/znehybňuje, aniž by narušovala krevní oběh.

Nežádoucí vedlejší účinky

Pomůcka může vyvolat kožní reakce (začervenání, svědění, popáleniny, puchýře...) nebo dokonce rány různého stupně.

Dojde-li v souvislosti s touto pomůckou k závažnému incidentu, je nutné o tom informovat výrobce a příslušné úřady členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient žije.

Návod k použití/Aplikace

V případě potřeby upravte dlaňovou výztuž.

Ortézou rozevřete a umístěte do ní zápěstí.

Nastavením upínacího systému ortézu sevřete.

Údržba

Výrobek perte podle pokynů uvedených v tomto návodu a na etiketě. Před praním vyjměte výztuž. Před dalším použitím je opět vložte na původní umístění. Před praním zavřete suché zipy. Lze prát v pračce na 40°C (jemné praní). Nepoužívat žádné čisticí, změkčovací prostředky nebo agresivní přípravky (chlorované přípravky...). Nečistit za sucha. Nesušit v sušičce. Nežehlit. Vyždímejte přebytečnou vodu. Sušit nalezato. Nesušit v blízkosti přímého zdroje tepla (radiátoru, slunce...).

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě, nejlépe v originálním balení.

Likvidace

Likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Tento návod si uschovejte

pl ORTEZA DO UNIERUCHOMIENIA NADGARSTKA

Opis/Przeznaczenie

Ten wyrób to ортеза nadgarstka umożliwiająca unieruchomienie stawu.

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w wymienionych wskazaniach oraz u pacjentów, których wymiary odpowiadają tabeli rozmiarów.

Skład

Elementy tekstylne: Poliamid - Poliester - Bawełna - Elastan.

Elementy sztywne: Polioksymetylenu - Aluminium.

Właściwości/Działanie

Unieruchomienie nadgarstka dzięki sztywnej fiszbinie od strony wnętrza dłoni, o anatomicznym, dopasowującym się kształcie.

Przepuszczalna tkanina, wewnątrz z podszewką piankową.

System podwójnego paska pozwalający zapewnić jednorodne podtrzymanie.

Wskazania

Skręcenie nadgarstka.

Niechirurgiczne złamanie nadgarstka.

Unieruchomienie pourazowe lub pooperacyjne nadgarstka.

Zapalenie ścięgien nadgarstka.

Leczenie zachowawcze zespołu cieśni nadgarstka.

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej.

Reumatoidalne zapalenie stawów.

Choroba zwyrodnieniowa nadgarstka.

Przeciwwskazania

Nie używać produktu, jeżeli diagnoza nie jest pewna.

Nie umieszczać produktu tak, aby bezpośrednio stykał się z uszkodzoną skórą.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej alergii na jeden ze składników.

Konieczne środki ostrożności

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wyrób jest w należyтым stanie.

Nie używać wyrobu, jeśli jest uszkodzony.

Wybrać rozmiar dobrany do pacjenta, korzystając z tabeli rozmiarów.

Zaleca się, aby pierwsze zastosowanie przebiegało pod nadzorem pracownika służby zdrowia.

Zaleca się, aby nakładanie produktu i korzystanie z niego przez dziecko przebiegało pod nadzorem osoby dorosłej.

Należy ściśle przestrzegać wytycznych i protokołu użytkowania zalecanego przez personel medyczny.

W razie lekkiego lub silnego dyskomfortu, bólu, zmiany wielkości kończyny, zaburzeń czuciowych lub zmiany koloru zakończeń palców, zdjąć wyrób i zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia.

Ze względów higienicznych i w trosce o skuteczność działania nie należy używać ponownie tego wyrobu u innego pacjenta.

Nie używać wyrobu w przypadku stosowania niektórych produktów na skórę (kremy, maści, oleje, żele, plastry itp.).

Zalecane jest odpowiednie dociągnięcie wyrobu w taki sposób, aby zapewnić podtrzymanie/unieruchomienie bez ograniczenia krążenia krwi.

Niepożądane skutki uboczne

Wyrób może spowodować reakcje skórne (zaczerwienienia, swędzenie, pieczenie, pęcherze itp.), a nawet rany o różnym nasileniu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Sposób użycia/Sposób zakładania

W razie potrzeby ukształtować fiszbinę od strony wnętrza dłoni.

Otworzyć ortezę i umieścić nadgarstek wewnątrz produktu.

Dopasować system mocowania, aby zamknąć ortezę.

Utrzymanie

Produkt nadaje się do prania w warunkach określonych w niniejszej instrukcji i na oznakowaniu. Przed praniem wyjąć fiszbinę. Do umieszczenia z powrotem na miejscu przed następnym użyciem. Przed praniem należy zapiąć rzepy. Nadaje się do prania w pralce w temp. 40°C (cykl delikatny).

Nie używać detergentów, produktów zmiękczejących ani agresywnych (zawierających chlor itp.). Nie czyścić na sucho. Nie suszyć w suszarce.

Nie prasować. Wycisnąć. Suszyć w stanie rozłożonym. Suszyć z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, słońce itp.).

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja

Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Zachować tę instrukcję

Iv PLAUKSTAS LOCĪTAVAS IMOBILIZĀCIJAS SAITE

Apraksts/Paredzētais mērķis

Šī ierīce ir plaukstas locītavas saite, kas ļauj imobilizēt locītavu.

Ierīce ir paredzēta tikai minēto indikāciju ārstēšanai pacientiem, kuru mērījumi atbilst izmēru tabulai.

Sastāvs

Tekstila sastāvdaļas: Poliamīds - Poliesters - Kokvilna - Elastāns.

Cietās sastāvdaļas: Polioksimetilēna - Alumīnijs.

Īpašības/Darbības veids

Plaukstas locītavas imobilizēšana ar stingru, anatomisku un pielāgojamu plaukstas ribi.

Elpojošs audums, iekšpuse izklāta ar putām.

Dīvu siksnu sistēma ļauj nodrošināt vienmērīgu saturēšanu.

Indikācijas

Plaukstas locītavas sastiepums.

Plaukstas locītavas neķirurģisks lūzums.

Plaukstas locītavas imobilizēšana pēc traumas vai operācijas.

Plaukstas locītavas tendinopātija.

Karpālā kanāla sindroma konservatīva ārstēšana.

Laterālais epikondilīts.

Reimatoīdais artrīts.

Plaukstas locītavas artroze.

Kontrindikācijas

Nelietojiet produktu, ja diagnoze nav skaidra.

Nenovietojiet produktu tieši saskarē ar savainotu ādu.

Nelietojiet, ja ir zināma alerģija pret kādu no sastāvdaļām.

Piesardzība lietošanā

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai prece nav bojāta.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

Izvēlieties pacientam atbilstošu izmēru, ņemot vērā izmēru tabulu.

Pirmajā uzlikšanas reizē ieteicama veselības aprūpes speciālista līdzdalība.

Pieaugušajam ieteicams uzraudzīt, kā bērns uzliek un lieto šo ierīci.

Stingri ievērojiet jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikumus un lietošanas norādījumus.

Diskomforta, būtisku traucējumu, sāpju, ekstremitāšu apjoma izmaiņu, neparastu sajūtu vai ekstremitāšu krāsas izmaiņu gadījumos noņemiet ierīci un vērsieties pie veselības aprūpes speciālista.

Higiēnas un veikspējas apsvērumu dēļ nelietojiet ierīci atkārtoti citiem pacientiem.

Nelietot ierīci gadījumā, ja uz ādas ir uzklāti noteikti produkti (krēmi, ziedes, eļļas, geli, plāksteri u. c.).

Ieteicams atbilstoši pievilkt ierīci, lai nodrošinātu uzturēšanu / imobilizāciju, neierobežojot asins plūsmu.

Nevēlamas blaknes

Šī ierīce var izraisīt ādas reakcijas (apsārtumu, niezi, apdegumus, tūlznas utt.) vai pat dažāda smaguma brūces.

Par jebkuriem smagiem negadījumiem, kas notikuši saistībā ar šo produktu, ir jāziņo ražotājam un dalībvalsts, kurā uzturas lietotājs un/vai pacients, atbildīgajai iestādei.

Lietošanas veids/Uzlikšana

Ja ir nepieciešams, pielāgojiet plaukstas ribi.

Atveriet saiti un novietojiet plaukstas locītavu produkta iekšpusē.

Noregulējiet fiksācijas sistēmu, lai aizvērtu saiti.

Uzturēšana

Produkts mazgājams saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā un marķējumā sniegtajiem nosacījumiem. Pirms mazgāšanas izņemiet ribi. Pirms nākamās lietošanas jāievieto atpakaļ. Pirms mazgāšanas aizveriet āķu un cilpu stiprinājumus. Var mazgāt veļasmašīnā 40°C temperatūrā (cikls smalkai veļai). Neizmantojiet balinātāju vai agresīvas iedarbības līdzekļus (hlora izstrādājumus). Nenododiet ķīmiskajā tīrīšanā. Nelietojiet veļas žāvētāju. Negludiniet. Izspiediet ūdeni ar spiedienu. Žāvējiet izklātu. Žāvējiet drošā attālumā no tieša siltuma avota (radiatora, saules utt.).

Uzglabāšana

Uzglabājiet istabas temperatūrā, vēlams, oriģinālajā iepakojumā.

Likvidēšana

Likvidējiet saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Saglabājiet šo instrukciju

It RIEŠO IMOBILIZAVIMO ĮTVARAS

Aprašymas ir paskirtis

Ši priemonė yra sąnarį imobilizuojantis riešo įtvaras.

Priemonė skirta tik išvardytoms indikacijoms gydyti ir tik pacientams, kurių kūno matmenys atitinka dydžių lentelę.

Sudėtis

Tekstilinės dalys: Poliamidas - Poliesteris - Medvilnė - Elastanas.

Standžios dalys: Polioksimetileno - Aliuminis.

Savybės ir veikimo būdas

Imobilizuoja riešą standžia, delno formą atitinkančia ir pritaikoma delno plokštėle.

Kvėpuojantis audinys, viduje poroloninis pamušalas.

Dvigubo dirželio sistema užtikrina vienodą suspaudimą.

Indikacijos

Riešo patempimas.

Neoperuojamas riešo lūžis.

Riešo imobilizavimas po traumos arba po operacijos.

Riešo tendinopatija.

Konservatyvus riešo kanalo sindromo gydymas.

Lateralinis epikondilitas.

Reumatoidinis artritas.

Riešo osteoartritas.

Kontraindikacijos

Jei diagnozė nėra aiški, gaminio nenaudokite.

Nenaudokite gaminio tiesiogiai ant pažeistos odos.

Nenaudokite gaminio, jei yra alergija bet kuriai sudėtinei medžiagai.

Atsargumo priemonės

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar priemonė tvarkinga, ar jai netrūksta dalių.

Nenaudokite priemonės, jei ji pažeista.

Remdamiesi dydžių lentele, pasirinkite pacientui tinkamą dydį.

Rekomenduojama, kad pirmą kartą gaminį padėtų užsidėti sveikatos priežiūros specialistas.

Jeigu gaminys naudojamas vaikui, rekomenduojama, kad gaminys būtų uždedamas ir naudojamas prižiūrint suaugusiam žmogui.

Griežtai naudoti pagal sveikatos specialisto nurodytą naudojimosi protokolą ir receptą.

Jei jaučiate nemalonius pojūčius, didelį diskomfortą, skausmą, galūnių patinimą, neįprastus pojūčius arba jei pasikeitė galūnių spalva, išimkite priemonę ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Higienos ir tinkamo veikimo sumetimais gaminio negali naudoti kitas pacientas.

Nenaudokite gaminio patepę odą kai kuriomis priemonėmis (kremais, tepalais, aliejais, geliais, užklįjavę pleistrą ir pan.).

Patariame priemonę tinkamai suveržti, kad ji palaikytų ar stabilizuotų galūnę netrukdydama tekėti kraujui.

Nepageidaujamas šalutinis poveikis

Ši priemonė gali sukelti odos reakciją (pvz., paraudimą, niežulį, nudegimus ar pūsles) ar net įvairaus sunkumo žaizdas.

Apie visus rimtus su gaminiu susijusius įvykius turėtų būti pranešama gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Naudojimas

Jei reikia, pritaikykite delno plokštelės formą.

Atsekite įtvarą iš įkiškite į jį riešą.

Sureguliuokite suveržimo sistemą ir užsekite įtvarą.

Priežiūra

Gaminį galima plauti šioje instrukcijoje ir ant etiketės nurodytomis sąlygomis. Prieš skalbdami išimkite plokštelę. Prieš naudodami įtvarą, sudėkite jas į vietą. Prieš skalbdami užsekite kibiąsias juostas. Skalbti skalbyklėje 40°C temperatūroje (švelniu ciklu). Nenaudoti valiklių, minkštiklių ar esdinančių produktų (priemonių su chloru). Nevalyti sausuoju būdu. Nedžiovinti džiovikliu. Nelyginti. Nausausinti spaudžiant. Džiovinti horizontaliai. Džiovinti toli nuo tiesioginio šilumos šaltinio (radiatoriaus, saulės ar pan.).

Laikymas

Laikyti kambario temperatūroje, pageidautina originalioje pakuotėje.

Išmetimas

Šalinkite pagal galiojančias vietas taisykles.

Išsaugokite šią instrukciją

et

RANDME FIKSEERIMISE LAHAS

Kirjeldus/Sihtkasutus

See seade on randmelahas, mis võimaldab liigese fikseerida.

Kasutage vahendit vaid loetletud näidustuste korral ning patsientide puhul, kelle kehamõõdud vastavad mõõdude tabelile.

Koostis

Tekstiilist osad: Polüamiid - Polüester - Puuvill - Elastaan.

Jälgad osad: Polüoksümetüleenist - Alumiinium.

Omadused/Toimeviis

Randme fikseerimine tänu anatoomilisele ja kohanevale jäigale peopesavardale.

Õhuline kangas, sisu kahekordne vahtmaterjal.

Kahekordne rihmasüsteem võimaldab tagada ühtlase surve.

Näidustused

Randme nihetus.

Mittekirurgiline randmemurd.

Randme trauma- või operatsioonijärgne fikseerimine.

Randme kõõlusepõletikud.

Randmekanali sündroomi konservatiivne ravi.

Lateraalne epikondüliit.

Reumatoidartriit.

Randme artroos.

Vastunäidustused

Mitte kasutada toodet ebatäpse diagnoosi puhul.

Mitte kasutada toodet kahjustatud nahal.

Mite kasutada allergia puhul toote ühe koostisosa suhtes.

Ettevaatusabinõud

Enne igat kasutamist kontrollige vahendi terviklikkust.

Mitte kasutada vahendit, kui see on kahjustatud.

Valige patsiendile õige suurusega vahend, lähtudes mõõtude tabelist.

Esmakordsel kasutamisel on soovitatav lasta tervishoiutöötajal selle paigaldamist jälgida.

Kui vahendit kasutab laps, on soovitatav, et lapsevanem tema tegevust jälgib. Järgige rangelt oma tervishoiutöötaja poolseid nõutavaid ettekirjutusi ja kasutusjuhiseid.

Kui teil tekivad ebamugavustunne, häiritus, valu, jäseme suuruse muutus, ebatavalised aistingud või sõrmede-varvaste värvi muutus, eemaldage vahend ja pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Tõhususe eesmärgil ja hügieeni tagamiseks mitte kasutada vahendit uuesti teistel patsientidel.

Ärge kasutage seadet, kui nahal kasutatakse teatavaid tooteid (kreemid, võided, õlid, geelid, plaastrid...).

Vahend tuleb oma kohale suruda piisava tugevusega, et tagada hea hoid/fiksatsioon ilma verevarustust takistamata.

Kõrvaltoimed

Vahend võib esile kutsuda nahareaktsioone (punetust, sügelust, põletustunnet, ville jne) või isegi erineva raskusastmega haavandeid.

Seadmega seotud mis tahes tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukoha liikmesriigi pädevale asutusele.

Kasutusjuhend/paigaldamine

Vajadusel kohandage peopesavarrast.

Avage lahas ja paigutage ranne tootesse.

Lahase sulgemiseks reguleerige pingutusüsteemi.

Puhastamine

Vahend on pestav vastavalt kasutusjuhendi ja tootemärgise tingimustele.

Enne pesemist eemaldage varras. Enne järgmist kasutust paigutage see algsesse kohta tagasi. Enne pesemist sulgege takjapaelad. Masinpestav 40°C juures (õrn programm).

Ärge kasutage puhastusaineid, pesupehmenajaid ega agressiivseid tooteid (klooriga tooteid). Ärge puhastage keemiliselt.

Ärge kasutage pesukuivatit. Ärge triikige. Ärge trummelkuivatage, vaid pressige liigne vesi välja. Kuivatage siledal pinnal. Laske kuivada otsese kuumuse allikast (radiaator, päike jne) eemal.

Säilitamine

Säilitage toatemperatuuril, soovitavalt originaalpakendis.

Kõrvaldamine

Kõrvaldage vahend vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Hoidke see kasutusjuhend alles

sl **OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO ZAPESTJA**

Opis/Namen

Ta opornica za zapestje omogoča imobilizacijo sklepa.

Izdelek je zasnovan le za zdravljenje navedenih indikacij in je namenjen pacientom, katerih mere ustrezajo meram v tabeli velikosti.

Sestava

Tekstilni materiali: Poliamid - Poliester - Bombaž - Elastan.

Trdi materiali: Polioksimetilena - Aluminij.

Lastnosti/Način delovanja

Imobilizacija zapestja s pomočjo trdega, anatomske oblikovanega in udobnega opornika v predelu dlani.

Zračen material, s peno podložena notranjost.

Sistem dveh trakov omogoča enakomerno oporo.

Indikacije

Zvin zapestja.

Nekirurški zlom zapestja.

Posttravmatska ali pooperativna imobilizacija zapestja.

Tendinopatija zapestja.

Konzervativno zdravljenje simptoma karpalnega kanala.

Bočni epikondilitis.

Revmatoidni artritis.

Artroza zapestja.

Kontraindikacije

Izdelka ne uporabljajte v primeru nepotrjene diagnoze.

Izdelka ne uporabljajte neposredno v stiku s poškodovano kožo.

Izdelka ne uporabljajte v primeru znane alergije na katerokoli sestavino.

Previdnostni ukrepi

Pred vsako uporabo preverite, v kakšnem stanju je izdelek.

Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabite.

S pomočjo tabele velikosti izberite pravilno velikost za pacienta.

Priporočamo, da prvo nameščanje nadzoruje zdravstveni delavec.

Priporočamo, da nameščanje in uporabo pri otroku nadzoruje odrasla oseba.

Skrbno upoštevajte navodila in postopek uporabe, ki ga priporoča zdravstveni delavec.

V primeru nelagodja, močnega neudobja, bolečine, sprememb v debelini okončine ali neobičajnih občutkov ali spremembe barve okončine, izdelek odstranite in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Zaradi zagotavljanja higijene in učinkovitosti, izdelka ne uporabljajte na drugem pacientu.

Izdelka ne uporabite, če se na koži nahajajo naslednji izdelki (kreme, mazila, olja, geli, obliži itd.).

Priporočamo, da izdelek dobro zategnete in tako poskrbite za oporo/ imobilizacijo, brez da bi ovirali pretok krvi.

Neželeni stranski učinki

Izdelek lahko povzroči različno močne kožne reakcije (pordelost, srbenje, opekline, žulje itd.) ali rane.

O vseh resnih težavah, ki so povezane z izdelkom, obvestite proizvajalca ali pristojni organ v državi, kjer se nahaja uporabnik in/ali pacient.

Navodila za uporabo/Namestitvev

Po potrebi prilagodite opornik v predelu dlani.

Odprite opornico ter zapestje namestite v notranjost izdelka.

Opornico zaprite s pomočjo sistema zapenjanja.

Vzdrževanje

Izdelek operite v skladu z navodili za uporabo in navodili na etiketi. Pred pranjem odstranite opornik. Pred naslednjo uporabo ga vrnite na svoje mesto. Pred pranjem zapnite trakove na ježek. Izdelek lahko strojno operete pri 40°C (program za občutljivo perilo). Ne uporabljajte detergentov, mehčalca ali agresivnih sredstev (izdelki, ki vsebujejo klor). Izdelek ni primeren za kemično čiščenje. Izdelka ne sušite v sušilnem stroju. Izdelka ne likajte. Iztisnite odvečno vodo. Izdelek plosko posušite. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote (radiator, sonce itd.).

Shranjevanje

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, če je možno, v originalni embalaži.

Odlaganje

Izdelek odvrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Shranite ta navodila

sk

IMOBILIZAČNÁ DLAHA NA ZÁPÄSTIE

Popis/Použitie

Táto pomôcka je dlahá na zápästie, ktorá umožňuje znehybnenie kĺba.

Táto zdravotnícka pomôcka je určená výhradne na liečbu ochorení podľa uvedených indikácií a pre pacientov, ktorých miery zodpovedajú tabuľke veľkostí.

Zloženie

Textilné zložky: Polyamid - Polyester - Bavlna - Elastan.

Pevné zložky: Polyoximetylénu - Hliník.

Vlastnosti/Mechanizmus účinku

Znehybnenie zápästia vďaka pevnej, anatomickej a pohodlnej dlaňovej kostici.

Vzdušná tkanina, dvojité penové vnútro.

Systém dvojitých pásov zabezpečuje rovnorodé fixovanie.

Indikácie

Vyvrtnutie zápästia.

Nechirurgická zlomenina zápästia.

Pourazové alebo pooperačné znehybnenie zápästia.

Tendinopatie zápästia.

Konzervatívna liečba syndrómu karpálneho tunela.

Bočná epikondylitída.

Reumatická artritída.

Artróza zápästia.

Kontraindikácie

Výrobok nepoužívajte v prípade nepotvrdenej diagnózy.

Výrobok neprikladajte priamo na poranenú pokožku.

Nepoužívajte v prípade známej alergie na niektorú zo zložiek výrobku.

Upozornenia

Pred každým použitím skontrolujte, či pomôcka nie je porušená.

Ak je pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.

Podľa tabuľky veľkostí si vyberte vhodnú veľkosť pre pacienta.
Pri prvom použití je odporučená asistencia zdravotníckeho odborníka.
Pri použití pomôcky dieťaťom je odporučená asistencia dospelšej osoby.
Prísne dodržiavajte predpis a protokol používania odporúčaný zdravotníckym odborníkom.

V prípade nepohodlia, vážneho diskomfortu, bolesti, zmeny vzhľadu (objemu) končatiny, nezvyklých pocitov alebo zmeny farby končatiny pomôcku zložte a poraďte sa so zdravotníckym odborníkom.

Z hygienických dôvodov a z dôvodu účinnosti nepoužívajte výrobok u iného pacienta.

Pomôcku nepoužívajte, ak si aplikujete isté výrobky na pokožku (krémy, masti, oleje, gély, liečivé náplasti...).

Pomôcka sa odporúča utiahnuť tak, aby sa zabezpečila podpora/znehybnenie bez obmedzenia krvného obehu.

Nežiaduce vedľajšie účinky

Táto pomôcka môže vyvolať kožné reakcie (začervnenia, svrbenie, popáleniny, pľuzgier, ...), dokonca rany rôznych stupňov.

Akúkoľvek závažnú udalosť týkajúcu sa používania pomôcky je potrebné oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.

Návod na použitie /aplikácia

Ak je to potrebné, prispôbte dlaňovú kosticu.

Otvorte dlahu a vložte zápästie do vnútra výrobku.

Prispôbte systém utiahnutia tak, aby ste dlahu zavreli.

Údržba

Výrobok sa dá prať za podmienok uvedených v tomto návode a na obale. Pred práním vyťahnite kosticu. Pred ďalším použitím vymeňte na pôvodnom mieste. Pred práním zatvorte suché zipsy. Možnosť prania pri 40°C (jemný cyklus). Nepoužívajte agresívne pracie prostriedky, zmäkčovadlá (chlórované výrobky, ...). Nečistite chemicky. Nepoužívajte sušičku na bielizeň. Nežehlite. Prebytočnú vodu vytlačte. Sušte vystreté v rovnej polohe. Sušte mimo priameho zdroja tepla (radiátor, slnko, ...).

Skladovanie

Uchovávajte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom obale.

Likvidácia

Výrobok likvidujte podľa platných miestnych predpisov.

Tento návod si uchovajte

hu **IMMOBILIZÁLÓ RÖGZÍTŐ CSUKLÓHOZ**

Leírás/Rendeltetés

Ez az eszköz egy olyan csuklórögzítő, amely lehetővé teszi az ízület immobilizálását.

Az eszköz kizárólag a felsorolt indikációk kezelésére szolgál azon betegek esetében, akiknek a méretei megfelelnek a mérettáblázatban szereplőknek.

Összetétel

Textil alkotóelemek: Poliamid - Poliészter - Pamut - Elasztán.

Szilárd alkotóelemek: Polioxi-Metilénből - Alumínium.

Tulajdonságok/Hatásmód

A csukló immobilizálása a szilárd, anatómiai és kényelmes kialakítású tenyérmerevítőnek köszönhetően.

Szellőző szövet, habbal bélelt belső rész.

A dupla szijrendszer lehetővé teszi az egyenletes kompresszió biztosítását.

Indikációk

Csukló rándulása.

Csukló sebészi ellátást nem igénylő törése.

A csukló poszttraumás vagy műtét utáni immobilizálása.

Csukló tendinopátiája.

A kéztőalagút-szindróma konzervatív kezelése.

Teniszkönyök.

Rheumatoid arthritis.

Csukló arthrosis.

Kontraindikációk

Bizonytalan diagnózis esetén ne használja a terméket.

A termék sérült bőrrel nem érintkezhet közvetlenül.

Ne használja ismert allergia esetén valamely összetevőre.

Óvintézkedések

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék épségét.

Ne használja a terméket, ha az sérült.

A mérettáblázat segítségével válassza ki a betegnek megfelelő méretet.

Javasolt, hogy az eszköz első alkalmazása egészségügyi szakember felügyelete mellett történjen.

Gyerek páciens esetében javasolt, hogy az eszköz alkalmazása és használata felnőtt felügyelete mellett történjen.

Szigorúan tartsa be az egészségügyi szakember előírásait és az általa javallt használatra vonatkozó protokollt.

Kellemetlen érzés, jelentős zavaró érzés, fájdalom, a végtag dagadása, a normálistól eltérő érzés vagy a végtag elszíneződése esetén vegye le az eszközt, és forduljon egészségügyi szakemberhez.

Higiéniiai okokból és az eszköz teljesítménye végett ne használja fel újra a terméket másik betegnél.

Ne használja az eszközt, ha bizonyos termékeket (krémek, kenőcsök, olajok, gélek, tapaszok stb.) visz fel a bőrére.

Javasolt az eszköz szorosságának megfelelő beállítása, ügyelve arra, hogy az eszköz a vérkeringés elszorítása nélküli tartást/rögzítést biztosítson.

Nemkívánatos mellékhatások

Az eszköz bőrreakciót (pirosságot, viszketést, égést, hólyagosodást stb.), akár változó súlyosságú sebeket is előidézhet.

Az eszközzel kapcsolatban fellépő bármilyen súlyos incidensről tájékoztatni kell a gyártót, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

Használati útmutató/felhelyezés

Szükség esetén alakítsa át a tenyérmerevítőt.

Nyissa ki a rögzítőt és helyezze a csuklóját a termék belsejébe.

A behúzórendszer beállításával zárja be a rögzítőt.

Ápolás

A jelen útmutatóban és a címkén feltüntetett információk szerint mosható termék. Mosás előtt vegye ki a merevítőt. A következő használat előtt helyezze vissza az eredeti helyére. Mosás előtt csatolja össze a tépőzáras pántokat. Mosógépben mosható 40 °C-on (kímélő program). Ne használjon tisztítószert, öblítőt vagy agresszív (klórtartalmú stb.) vegyszert. Tilos vegytisztítani. Ne tegye szárítógépbe. Tilos vasalni. Nyomkodja ki belőle a vizet. Fektetve szárítsa. Közvetlen hőforrástól (radiátor, napsugárzás stb.) távol szárítsa.

Tárolás

Szobahőmérsékleten tárolja, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában.

Ártalmatlanítás

A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Őrizze meg ezt a betegájékoztatót

bg

ШИНА ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА КИТКА

Описание/Предназначение

Това изделие е шина за китка, позволяваща имобилизация на ставата. Изделието е предназначено единствено за лечение при изброените показания и за пациенти, чиито телесни мерки съответстват на таблицата с размери.

Състав

Текстилни компоненти: Полиамид - Полиестер - Памук - Еластан.

Твърди компоненти: Полиоксиметилен - Алуминий.

Свойства/Начин на действие

Имобилизация на китката благодарение на ригидна палмарна опора; анатомична и удобна.

Ефирен плат; вътрешността е подплатена с пяна.

Система с двойна каишка, позволяваща осигуряването на хомогенна задръжка.

Показания

Изкълчване на китка.

Фрактура без хирургическа намеса на китка.

Посттравматична или постоперативна имобилизация на китка.

Тендинопатии на китка.

Консервативно лечение на синдрома на карпалния канал.

Латерален епикондилит.

Ревматоиден артрит.

Артроза на китка.

Противопоказания

Не използвайте продукта при неустановена диагноза.

Не поставяйте продукта в пряк контакт с увредена кожа.

Не използвайте, ако имате алергия към някой от компонентите.

Предпазни мерки

Преди всяка употреба проверявайте за целостта на изделието.

Не използвайте изделието, ако е повредено.

Изберете подходящата за пациента големина, като направите справка в таблицата с размерите.

Препоръчва се първото приложение да се проследи от здравен специалист.

Препоръчва се възрастен да следи приложението и употребата на продукта от дете.

Спазвайте стриктно предписанията и схемата за използване, предоставени от вашия здравен специалист.

При дискомфорт, чувствително неудобство, болка, промяна в обема на крайника, необичайни усещания или промяна в цвета по периферията, свалете изделието и се посъветвайте със здравен специалист.

От гледна точка на хигиенни съображения и работни характеристики не използвайте повторно изделието за друг пациент.

Не използвайте устройството, в случай че определени продукти се нанасят върху кожата (кремове, мазила, масла, гелове, лепенки...).

Препоръчва се да стягате изделието с подходяща сила, която да осигури задръжането/обездвижването, без да нарушава кръвообращението.

Нежелани странични ефекти

Това изделие може да предизвика кожни реакции (зачервяване, сърбеж, изгаряне, мехури и др.) или дори рани с различна степен тежест.

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с продукта, трябва да бъде предмет на уведомление, адресирано до производителя и до компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителя и/или пациента.

Начин на употреба/Поставяне

Ако е необходимо, приспособете палмарната опора.

Отворете шината и поставете китката във вътрешността на продукта.

Нагласете системата за затягане, за да затворите шината.

Съхранение

Продуктът се пере при условията, посочени в тази инструкция и на етикета. Премахнете опората преди измиване. Поставете отново на първоначалното място преди следващата употреба. Преди изпиране затворете самозалепващите се краища. Може да се пере в пералня при 40°C (деликатна програма). Не използвайте перилни препарати, омекотители или продукти с агресивен ефект (хлорирани продукти и др.). Не прилагайте химическо почистване. Не използвайте сушилня. Не гладете. Изцеждайте с притискане. Сушете в хоризонтално положение. Сушете далеч от пряк източник на топлина (радиатор, слънце и др.).

Съхранение

Съхранявайте при стайна температура, за предпочитане в оригиналната опаковка.

Изхвърляне

Изхвърляйте в съответствие с действащата местна нормативна уредба.

Запазете настоящото упътване

ro **ATELĂ DE IMOBILIZARE A ÎNCHEIETURII MÂINII**

Descriere/Destinație

Acest dispozitiv este o atelă pentru încheietura mâinii, care permite imobilizarea articulației.

Dispozitivul este destinat exclusiv pentru tratamentul indicațiilor enumerate și pentru pacienții ale căror dimensiuni corespund tabelului de mărimi.

Compoziție

Componente textile: Poliamidă - Poliester - Bumbac - Elastan.

Componente rigide: Polioximetilenă - Aluminiu.

Proprietăți/Mod de acțiune

Imobilizarea încheieturii mâinii, datorită unei balene palmare rigide, anatomice și ajustabile.

Material aerat, interior dublat cu spumă.

Sistem de chingă dublă, care permite asigurarea unei conținții omogene.

Indicații

Entorsa încheieturii mâinii.

Fractură nechirurgicală a încheieturii mâinii.

Imobilizare posttraumatică sau postoperatorie a încheieturii mâinii.

Tendinopatiile încheieturii mâinii.

Tratamentul conservator al sindromului canalului carpian.

Epicondilită laterală.

Artrită reumatoidă.

Artroza încheieturii mâinii.

Contraindicații

Nu utilizați produsul în cazul unui diagnostic incert.

Nu așezați produsul direct în contact cu pielea rănită.

Nu utilizați în cazul unei alergii cunoscute la oricare dintre componente.

Precauții

Verificați integritatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare.

Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.

Alegeți dimensiunea adaptată pentru pacient, consultând tabelul de mărimi.

Se recomandă ca un specialist în domeniul sănătății să supravegheze prima aplicare.

Se recomandă ca un adult să supravegheze aplicarea și utilizarea produsului de către un copil.

Respectați cu strictețe rețeta și protocolul de utilizare recomandate de către medicul dumneavoastră.

În caz de disconfort, disconfort semnificativ, durere, variație a volumului membrului, senzații anormale sau schimbarea culorii extremităților, scoateți dispozitivul și consultați un specialist în domeniul sănătății.

Din motive de igienă și performanță, nu refolosiți dispozitivul pentru alt pacient.

Nu utilizați acest dispozitiv în cazul aplicării anumitor produse pe piele (creme, pomezi, uleiuri, geluri, plasturi etc.).

Se recomandă strângerea produsului în mod corespunzător pentru a asigura menținerea/imobilizarea fără limitarea circulației sanguine.

Reacții adverse nedorite

Acest dispozitiv poate provoca reacții cutanate (roșeață, mâncărime, arsuri, vezicule etc.) sau chiar plăgi de severitate variabilă.

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie să facă obiectul unei notificări transmise producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Mod de utilizare/Poziționare

Dacă este necesar, ajustați balena palmară.

Deschideți atela și poziționați încheietura mâinii în interiorul produsului.

Reglați sistemul de prindere, pentru a închide atela.

Întreținere

Produs lavabil în conformitate cu condițiile prezentate în acest prospect și pe etichetă. Scoate balena, înainte de spălare. Se va pune în locul inițial, înainte de următoarea utilizare. Închideți dispozitivele auto-adezive înainte de spălare. Spălați în mașină la 40°C (ciclu delicat). Nu utilizați detergenți, balsamuri sau produse agresive (produse clorurate etc.). A nu se curăța chimic. Nu folosiți un uscător de rufe. Nu călcați. Stoarceți prin presare. Uscați în poziție orizontală. Uscați departe de o sursă directă de căldură (radiator, soare etc.).

Depozitare

Depozitați la temperatura camerei, de preferință în ambalajul original.

Eliminare

Eliminați în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Păstrați acest prospect

ru **ШИНА ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЗАПЯСТЬЯ**

Описание/назначение

Данное изделие является шиной для запястья, предназначенной для иммобилизации лучезапястного сустава.

Изделие предназначено исключительно для использования при наличии перечисленных показаний. Размер изделия следует подбирать строго в соответствии с таблицей размеров.

Состав

Состав текстильной части: Полиэфир - Полиамид - Хлопок - Эластан.

Состав жёстких элементов: Полиоксиметилэтилен - Алюминий.

Свойства/принцип действия

Иммобилизация запястья происходит благодаря ребру жесткости удобной анатомичной формы, расположенному со стороны ладони.

Воздухопроницаемая ткань, подкладка из пеноматериала.

Двойные ремешки позволяют обеспечить равномерное давление по всей конечности.

Показания

Растяжение запястья.

Закрытый перелом запястья.

Иммобилизация запястья после травмы или оперативного вмешательства.

Тендинопатии запястья.

Консервативное лечение симптомов туннельного синдрома.

Латеральный эпикондилит.

Ревматоидный артрит.

Артроз запястья.

Противопоказания

Не используйте изделие при неопределённом диагнозе.

Не размещайте изделие непосредственно на поврежденной коже.

Не используйте в случае наличия аллергии на любой из компонентов.

Рекомендации

Перед началом использования убедитесь в целостности изделия.

Не используйте изделие, если оно повреждено.

Выберите размер, который подходит пациенту, руководствуясь таблицей размеров.

Рекомендуется, чтобы лечащий врач наблюдал за первым наложением.

Рекомендуется, чтобы взрослый наблюдал за наложением и использованием изделия ребенком.

Строго придерживайтесь врачебного назначения и соблюдайте порядок использования, предписанный лечащим врачом.

При появлении дискомфорта, значительной стесненности движений, колебаний объема конечности, непривычных ощущений или при изменении цвета конечности рекомендуется снять изделие и обратиться к лечащему врачу.

Из соображений гигиены и эффективности не используйте изделие повторно для другого пациента.

Не используйте изделие в случае обработки кожи специальными средствами, например кремом, мазью, маслом, гелем, или наложения на нее пластыря.

Рекомендуется затянуть изделие достаточно туго для того, чтобы обеспечить поддержку/иммобилизацию и не нарушить при этом кровообращение.

Нежелательные последствия

Это изделие может вызвать кожные реакции (покраснение, зуд, ожоги, волдыри и т. д.) или даже привести к появлению ран различной степени тяжести.

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с использованием настоящего изделия, следует сообщать изготовителю и в компетентный

орган страны – члена ЕС, на территории которой находится пользователь и/или пациент.

Порядок использования/процедура наложения

В случае необходимости скорректируйте ребро жесткости, расположенное на запястье.

Разверните изделие и разместите запястье на его внутренней поверхности.

Затяните шнурки, чтобы закрепить изделие.

Уход

Изделие можно стирать. Обязательные к соблюдению условия стирки приведены в этой инструкции и на этикетке. Перед стиркой извлеките ребро жесткости. Перед следующим использованием установите на место. Перед стиркой застегивайте все липучки. Можно стирать в стиральной машине при температуре 40°C (в режиме деликатной стирки). Не используйте отбеливатели, кондиционеры или другие моющие средства, содержащие агрессивные компоненты (в особенности хлорсодержащие). Не сдавайте в химчистку. Не используйте сушку для белья. Не гладьте утюгом. Отжимайте руками. Сушите в горизонтальном положении. Сушите вдали от прямых источников тепла (радиатора, солнца и т. д.).

Хранение

Хранить изделие рекомендуется при комнатной температуре, желательна оригинальная упаковка.

Утилизация

Утилизируйте в соответствии с требованиями местного законодательства.

Сохраните эту инструкцию

hr UDLAGA ZA IMOBILIZACIJU RUČNOG ZGLOBA

Opis/namjena

Ovaj je proizvod udlaga za ručni zglob koja omogućuje imobilizaciju zgloba. Proizvod je namijenjen samo za liječenje navedenih indikacija kod pacijenata čije mjere odgovaraju onima u tablici veličina.

Sastav

Tekstilne komponente: Poliamid - Poliester - Pamuk - Elastan.

Čvrste komponente: Polioksimetilena - Aluminiј.

Svojstva/način rada

Imobilizacija ručnog zgloba pomoću čvrstog anatomskeg i prilagodljivog ojačanja za dlanove.

Prozračni materijal, unutrašnjost podstavljena pjenastim materijalom.

Sustav dvostrukih remena omogućuje ravnomjernu imobilizaciju.

Indikacije

Istegnuće ručnog zgloba.

Nekirurški prijelom ručnog zgloba.

Posttraumatska ili postoperativna imobilizacija ručnog zgloba.

Tendinopatija ručnog zgloba.

Konzervativno liječenje sindroma karpalnog tunela.

Lateralni epikondilitis.

Reumatoidni artritis.

Artroza ručnog zgloba.

Kontraindikacije

Nemojte upotrebljavati proizvod ako dijagnoza nije potvrđena.

Proizvod nemojte nanositi izravno na oštećenu kožu.

Nemojte upotrebljavati ako imate utvrđenu alergiju na neki od sastojaka.

Mjere opreza

Prije svake upotrebe provjerite sadrži li proizvod sve dijelove.

Proizvod nemojte upotrebljavati ako je oštećen.

Pomoću tablice veličina odaberite odgovarajuću veličinu za pacijenta.

Preporučujemo da se prva primjena vrši pod nadzorom liječnika.

Preporučujemo da se primjena i upotreba proizvoda kod djece vrši pod nadzorom odrasle osobe.

Strogo se pridržavajte uputa i protokola za upotrebu koje preporučuje liječnik.

U slučaju osjećaja nelagode, značajnijih smetnji, boli, promjene obujma uda, neuobičajenih osjećaja ili promjene boje ekstremiteta, uklonite proizvod i obratite se liječniku.

Zbog higijenskih razloga i djelovanja proizvoda, nemojte ga ponovno upotrebljavati kod drugih pacijenata.

Proizvod nemojte koristiti ako ste prethodno nanijeli proizvode za kožu (kreme, masti, ulja, gelove, flastere...)

Preporučujemo da odgovarajuće zategnete proizvod kako biste osigurali da prijanja/imobilizira tako da ne ometa cirkulaciju krvi.

Neželjene nuspojave

Ovaj proizvod može prouzročiti reakcije na koži (crvenilo, svrab, opekline, žuljeve...) ili ozljede različitih stupnjeva.

Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj su korisnik i/ili pacijent smješteni.

Način uporabe/Postavljanje

Prema potrebi prilagodite ojačanje za dlan.

Udlagu otvorite i ručni zglob postavite unutar proizvoda.

Namjestite sustav za stezanje da biste udlagu zatvorili.

Upute za pranje

Proizvod je periv prema uputama u ovom priručniku. Prije pranja uklonite pločicu. Prije sljedeće upotrebe vratite na mjesto. Prije pranja zalijepite čičak-trake. Perivo u perilici na temperaturi od 40°C (ciklus za osjetljivo rublje). Nemojte upotrebljavati deterdžente, omekšivače ili agresivna sredstva (sredstva s klorom...). Ne čistiti kemijski. Nemojte sušiti u sušilici rublja. Ne glačati. Iscijedite višak vode. Sušite postavljanjem na ravnu površinu. Sušite podalje od izravnog izvora topline (radijatora, sunca...).

Spremanje

Spremite na sobnoj temperaturi, po mogućnosti u originalnu ambalažu.

Zbrinjavanje

Zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.

Sačuvajte ovaj priručnik

zh

腕部固定夹板

说明/用途

该装置是一种用于固定关节的腕部夹板。

该装备仅用于治疗所列出的适应症，以及尺寸符合尺寸表的客户。

组成部件

织物成分：聚酰胺-聚酯纤维-棉-氨纶。

刚性组件：聚甲醛-铝材。

属性/作用方式

利用掌部一个刚性的、符合解剖学且舒适的掌弓支撑条固定手腕。

透气面料，双层泡沫内衬。

双绑带系统，确保均匀紧固。

适应症

腕部扭伤。

非手术性腕部骨折。

腕部创伤后或术后固定。

腕部肌腱病。

腕管综合征保守治疗。

侧上髌炎。

类风湿性关节炎。

腕部骨关节炎。

禁忌症

诊断不确定的情况下请勿使用该产品。

请勿将该产品直接与受损皮肤接触。

如已知对任一组件过敏，请勿使用。

注意事项

每次使用前请检查产品是否完好。

如产品有损，请勿使用。

请参照尺寸表为患者挑选合适的尺寸。

建议由专业医护人员监督初次穿戴。

建议由一名成人监督儿童穿戴和使用该产品。

严格遵守专业医护人员推荐的处方和使用方法。

如有出现不舒服、严重不适、疼痛、肢体肿胀、感觉异常或肢端颜色改变，请立即脱下该装备，并咨询医护人员。

出于卫生和性能的考虑，请勿将该装备重复用于其他患者。

如果皮肤上涂有某些产品（乳霜、软膏、油、凝胶、贴片...），请勿使用该装置。

建议适当拧紧该装备，以确保保持/固定位置而不限制血液流通。

不良副作用

该装备可能会引起皮肤反应（发红、发痒、灼热、起泡等）甚至不同程度的伤口。

如发生任何与该产品有关的严重事故，请与患者所在地区的制造商及国家监管机构联系。

使用说明/穿戴方法

如有必要，调整掌弓支撑条。

打开夹板，将手腕放入装置内。

调整紧固系统闭合夹板。

保养服务

可根据本说明和标签上的条件洗涤该产品。洗涤前先将支撑条取出。在下次使用前重新放回原始位置。清洗之前，请闭合钩环紧固件。可在40°C下机洗（轻柔模式）。请勿使用洗涤剂、柔软剂或腐蚀性产品（氯化产品等）。请勿干洗。请勿使用脱水机。请勿熨烫。施压拧紧。平放晾干。远离热源（加热器、阳光等）晾干。

存放

请室温保存，最好存放在原始包装中。

弃置

根据本地现行规范弃置。

保留本说明页

جيرة لتثبيت الرسغ

الوصف/الغرضالوصف/الغرض
هذا الجهاز عبارة عن جيرة للرسغ تسمح بتثبيت المفصل.
الجهاز مخصص فقط لعلاج المؤشرات المذكورة وللمرضى الذين تتوافق قياساتهم مع جدول المقاسات.

التكوين

المكونات المنسوجة : بولياميد - بوليستر- قطن - إيلاستان.
المكونات الصلبة : متعدد أكسيد الميثيلين - ألومنيوم

الخصائص/طريقة العمل

تثبيت الرسغ بفضل شريحة راحية صلبة وتشريحية ومطابقة.
قماش جيد التهوية وحشوة داخلية مزدوجة من المطاط الإسفنجي.
نظام حزام مزدوج لضمان تقييد بشكل متجانس.

دواعي الاستعمال

التواء الرسغ.
كسر غير جراحي للرسغ.
تثبيت الرسغ بعد الصدمة أو بعد الجراحة.
اعتلال أوتار الرسغ.
علاج تحفظي لمتلازمة النفق الرسغي.
التهاب اللقيمة الجانبي.
التهاب المفصل الروماتويدي.
التهاب مفصل الرسغ.

موانع الاستعمال

لا تستخدم المنتج إذا كان التشخيص غير مؤكد.
لا تضع المنتج على اتصال مباشر مع جلد مصاب بجرح.
لا يستخدم في حالة وجود حساسية معروفة لأي من مكوناته.

الاحتياطات

تحقق من سلامة الجهاز قبل كل استخدام.
لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً.
اختر المقاس الملائم للمريض بالرجوع إلى جدول المقاسات.
يوصى بأن يشرف أخصائي رعاية صحية على وضعه في المرة الأولى.
يوصى بأن يشرف شخص بالغ على وضع واستخدام المنتج بواسطة الطفل.
الترم بدقة بالوصفة الطبية وبيروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
في حالة الشعور بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الألم، أو تغير حجم عضو الجسم، أو الأحاسيس غير الطبيعية أو تغير لون الأطراف، قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائي رعاية صحية.
لأسباب تتعلق بالنظافة والأداء، لا تستخدم الجهاز مجدداً مع مريض آخر.
لا تستخدم الجهاز في حالة وضع منتجات معينة على الجلد (الكريمات والمراهم والزيوت والهلام واللصقات وما إلى ذلك).
يوصى بإحكام تثبيت الجهاز بشكل مناسب من أجل ضمان المحافظة/التثبيت دون إعاقة الدورة الدموية.

الآثار الثانوية غير المرغوب فيها

يمكن أن يتسبب هذا الجهاز في تفاعلات جلدية (احمرار، حكة، حروق، بثور...) أو حتى جروح متفاوتة الشدة.
يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يوجد فيها المستخدم و/أو المريض بأي حادث خطير يتعلق بالتجهيز.

طريقة الاستعمال/الوضع

إذا لزم الأمر، قم بمطابقة الشريحة الراحية.
افتح الجيرة وضع رسغك داخل المنتج.
اضبط نظام الشد لغلق الجيرة.

الصيانة

منتج قابل للغسل حسب الشروط الموجودة في هذا الدليل والملصقات. قم بإزالة الشريحة قبل الغسل. يُستبدل في المكان الأصلي قبل الاستخدام التالي. أغلق الماسكات الذاتية قبل الغسيل. يمكن غسله بالغسالة الكهربائية على درجة حرارة 40 درجة مئوية (دورة الملابس الرقيقة). لا تستخدم المنظفات أو المنعمات أو المنتجات القوية (المنتجات المضاف إليها كلور...). لا تستخدم التنظيف الجاف. لا تستخدم المجفف. لا يتم كي المنتج. يتم عصر المنتج عن طريق الضغط. يتم التجفيف على سطح مستو. يتم التجفيف بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...).

التخزين

يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ويفضل أن يتم تخزينه في عبوته الأصلية.

التخلص

تخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية المعمول بها.

احتفظ بهذا الدليل

www.thuasne.com

www.thuasne.com/global-contact



©Thuasne - 2020201 (2020-11)

